



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Numéro de publication : **0 442 776 A1**

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt : **91400257.1**

(51) Int. Cl.⁵ : **G01N 33/48**

(22) Date de dépôt : **04.02.91**

(30) Priorité : **13.02.90 FR 9001660**

(43) Date de publication de la demande :
21.08.91 Bulletin 91/34

(84) Etats contractants désignés :
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71) Demandeur : **ABX , Société Anonyme dite
Parc Euromédecine, 128, rue du Caducée
F-34184 Montpellier Cédex 4 (FR)**

(72) Inventeur : **Lefevre, Didier
36 rue des Plaisances
F-78200 Mantes la Ville (FR)
Inventeur : **Champseix, Henri
2 Chemin de Cambas, Ploch de Baillos
F-34980 Montferrier-sur-Lez (FR)****

(74) Mandataire : **Lhuillier, René et al
Cabinet Lepeudry, 6 rue du Faubourg
St-Honoré
F-75008 Paris (FR)**

(54) **Réactif et méthode d'utilisation de celui-ci pour la numération automatique des leucocytes basophiles du sang en appareils de mesure par variation de leur résistivité.**

(57) L'invention concerne un réactif et une méthode d'utilisation de celui-ci pour la détermination automatique de la population des leucocytes basophiles du sang.

L'invention concerne plus particulièrement une nouvelle formulation d'un réactif lytique différentiel, qui lyse toutes les cellules sanguines sauf les basophiles, particulièrement adaptée au principe de mesure par variation de résistivité, c'est à dire que les concentrations des constituants et le pH de la solution sont adaptés pour assurer une bonne conductivité électrique du milieu.

Le réactif de l'invention trouve son application dans les appareils de détermination automatique des formules sanguines, par mesures de variations de résistivité.

EP 0 442 776 A1

REACTIF ET METHODE D'UTILISATION DE CELUI-CI POUR LA NUMERATION AUTOMATIQUE DES LEUCOCYTES BASOPHILES DU SANG EN APPAREILS DE MESURE PAR VARIATION DE RESISTIVITE

L'invention a pour objet l'analyse de formules sanguines par comptage et discrimination d'au-moins une sous-population leucocytaire et concerne plus particulièrement un réactif et une méthode d'utilisation de celui-ci pour la numération des granulocytes basophiles en cytométrie de flux par mesure de résistivité.

L'importance diagnostique de la détermination précise des différentes population leucocytaires est reconnue depuis longtemps, en effet, l'apparition de rapports leucocytaires anormaux peut être corrélée à l'apparition de diverses maladies.

Les méthodes traditionnelles de coloration spécifique et l'observation au microscope permettaient déjà de distinguer tous les types de leucocytes, c'est à dire les granulocytes (basophiles, éosinophiles et neutrophiles) et les agranulocytes (monocytes et lymphocytes), mais leur mise en oeuvre est très longue.

Divers appareils automatiques sont déjà commercialisés qui permettent le comptage des différentes populations leucocytaires du sang total et divers réactifs et colorants ont été mis au point pour être utilisés dans ces appareils.

Ainsi on peut mesurer les tailles des cellules, après lyse différentielle de leur cytoplasme, soit par mesure de variations de résistivité (comme décrit, par exemple, dans le brevet WO 84/03771) soit par mesure de diffraction optique (comme décrit par exemple dans le brevet US 3.740.143) ; on peut aussi effectuer des colorations (enzymatiques ou non) spécifiques des différents types cellulaires, et particulièrement des trois types de granulocytes, puis mesurer les tailles et densités optiques des cellules à différentes longueurs d'onde (brevet US 3.740.143).

Le comptage des granulocytes basophiles est particulièrement délicat parce que ce type de cellule ne représente que 0,5 à 1 % des globules blancs.

Les granulocytes basophiles se distinguent par leur contenu élevé en héparine, un polysaccharide sulfaté qui peut être révélé par des colorants de la famille des phthalocyanures comme le Bleu Alcian ou le Bleu Astra.

La coloration des granulocytes basophiles au Rouge Neutre, classiquement utilisée en méthode manuelle, peut aussi être combinée au traitement de lyse différentielle des leucocytes pour être utilisée en appareil automatique (brevet US 3.740.143).

La demande de brevet européen 0.177.137 décrit un réactif lytique qui permet la destruction progressive de toutes les cellules sanguines à l'exception des basophiles. Ce réactif endommage les membranes cellulaires ce qui entraîne la fuite du cytoplasme. A différents intervalles de temps on voit disparaître les différents types cellulaires c'est à dire successivement les érythrocytes, les lymphocytes, les éosinophiles, les neutrophiles et les monocytes. Après 80 secondes, seuls les basophiles conservent leur taille et leur morphologie normales. Le principe actif de ce réactif est un mélange de surfactant et d'acide dilué. Ce mélange doit être utilisé dans une gamme étroite de pH comprise entre 1,8 et 2,3.

Ce réactif donne de bons résultats dans les appareils de comptage par lecture optique mais il n'est pas adapté aux mesures par résistivité ; en particulier, il pose un problème important d'encrassement de l'orifice de comptage de l'appareil, la destruction des membranes des hématies n'étant pas complète.

Le principe de numération cellulaire par résistivité repose sur le maintien d'un champ électrique où est entretenu un courant constant ; le passage d'une cellule dans ce champ provoque une augmentation de la tension nécessaire au maintien du courant constant (selon la loi d'Ohm). L'impulsion de tension générée par le passage d'une cellule (et qui constitue la mesure enregistrée par l'appareil) est proportionnelle à la résistance opposée, donc au volume de la cellule, indépendamment de sa forme. Ce mode de détection ne s'applique donc qu'à des cellules préalablement traitées (plus particulièrement par cytolysé différentielle) pour obtenir une discrimination très nette des tailles des sous-populations.

Cette méthode est d'un emploi très simple puisqu'il n'est pas nécessaire de colorer les cellules.

La Demanderesse a mis au point une nouvelle formulation du réactif de lyse différentielle qui préserve les granulocytes basophiles pour permettre son utilisation dans les appareils de mesure par résistivité.

Ainsi le réactif selon la présente invention comprend un surfactant de type éther de polyoxyéthylène (comme le Brij 35 ou 23-lauryl-éther) à une concentration comprise entre 1 et 5 g/l et un mélange d'acide phthalique à une concentration de 0,5 à 1,5 g/l et d'HCl 0,25 mM. Les concentrations relatives des différents constituants sont ajustées pour réaliser un pH compris entre 2,5 et 3,2.

La Demanderesse a constaté qu'on améliorerait la sensibilité de la détection en ajoutant au réactif du SDS (dodécyl sulfate de sodium), à une concentration comprise entre 50 et 300 mg/l, comme agent dénaturant des protéines ce qui diminue la formation de dépôts dans l'instrument de mesure ; en outre le SDS accélère la lyse des cellules.

Le réactif sera avantageusement additionné d'un agent antioxydant comme l'hydroxytoluène butylé ou BHT ($C_{11}H_{10}$ -di-tert-butyl-4-méthylphenol) à une concentration de 10 à 30 mg/l.

5 Ainsi selon un mode préféré de l'invention, le réactif comprend les constituants suivants :

	1	à	5	g/l	de Brij 35
	0,5	à	1,5	g/l	d'acide phthalique
10			0,25	mM	HCl
	50	à	300	mg/l	de SDS
	10	à	30	mg/l	d'hydroxytoluène butylé

15 Selon un mode de réalisation de l'invention, le réactif peut encore être additionné de Bleu Astra, colorant spécifique des granules d'héparine, qui assure une meilleure fixation de ceux-ci.

L'invention concerne également une méthode d'utilisation de ce réactif en appareil automatique à cytométrie de flux, par mesure de résistivité, pour la détermination des leucocytes basophiles.

20 La méthode selon l'invention comprend la mise en contact de l'échantillon sanguin à étudier et du réactif, dans une enceinte thermostatée à une température comprise entre 30 et 40°C pendant une durée de 5 à 30 secondes (la température et le temps de contact étant ajustés, en fonction inverse l'un de l'autre).

La méthode comprend ensuite la détection des cellules intactes, c'est à dire les basophiles, par une mesure de résistivité dans un appareil de détection approprié et l'enregistrement de ces mesures sous forme d'histogramme.

25 La figure est un histogramme représentatif obtenu par la mise en oeuvre de la méthode selon l'invention sur un échantillon de sang normal.

L'exemple suivant illustre un mode de réalisation de l'invention sans toutefois en limiter la portée.

30 Exemple

Les concentrations suivantes des divers constituants sont calculées pour la préparation d'un litre de réactif:

	Brij 35	2,5 g
	acide phthalique	0,9 g
35	HCl-1N	0,25 ml
	SDS	200 mg
	hydroxytoluène butylé	25 mg
	Eau distillée	ajusté à 1 litre

Le pH est maintenu à 2,7 (entre 2,5 et 3,2)

40 Le réactif peut être additionné de Bleu Astra, à une concentration de 10 à 100 mg/l ; dans les conditions de pH choisies le Bleu Astra est soluble et stable.

Ce réactif peut être utilisé dans tout appareil de comptage automatique des globules sanguins basé sur le principe de la mesure de résistivité [par exemple ABX modèle 504F]. La tension des électrodes est ajustée à 100 V.

45 L'appareil est réglé pour mettre en contact un échantillon de 15 µl de sang total et 2 ml de réactif. Ce mélange est réalisé dans une enceinte thermostatée à une température de 40°C pendant 17 secondes. (On obtient le même résultat en diminuant la température et en augmentant le temps de contact et vice et versa).


Le réactif provoque une lyse immédiate des globules rouges puis une lyse progressive de tous les autres types de globules à l'exception des granulocytes basophiles. Après 30 secondes de contact à 40°C on peut 50 vérifier par détermination manuelle et observation au microscope que tous les basophiles ont conservé une morphologie intacte. Quand le réactif contient du Bleu Astra, la coloration des basophiles est proportionnelle à la concentration de Bleu utilisée.

Un histogramme représentatif d'un échantillon de sang normal est présenté sur la figure 1 : la courbe 1.1 représente la détermination effectuée dans du milieu sans SDS ni Bleu Astra et à pH 1,9 ; on observe que les 55 résidus de membrane d'hématies gênent la mesure de résistivité. La courbe 1.2 représente la détermination effectué dans le réactif de la présente invention ; la zone A correspond aux noyaux des cellules lysées ; la zone B correspond aux leucocytes basophiles dont le cytoplasme est intact.


Revendications

- 5 1. Réactif lytique différentiel pour la numération des leucocytes basophiles du sang dans un analyseur automatique par mesure de résistivité, caractérisé en ce qu'il comprend
 - un surfactant de type éther de polyoxyéthylène
 - un mélange d'acide phtalique - HCl
 - du SDS (dodecylsulfate de sodium)
 - 10 - un antioxydant de type hydroxytoluène butylé, en ce que son pH est compris entre 2,5 et 3,2 et qu'il est électriquement conducteur.
- 2.- Réactif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le surfactant est du Brij 35 à une concentration finale comprise entre 1 et 5 g/l.
- 3.- Réactif selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que le mélange d'acide comprend de l'acide phtalique à une concentration finale de 0,5 à 1,5 g/l et de l'HCl à une concentration finale de 0,25 mM.
- 15 4.- Réactif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisé en ce qu'il contient du SDS à une concentration finale comprise entre 50 et 300 mg/l.
- 5.- Réactif selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisé en ce qu'il contient de l'hydroxytoluène butylé à une concentration finale de 10 à 30 mg/l.
- 20 6.- réactif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisé en ce qu'il contient du Bleu Astra à une concentration comprise entre 10 et 100 mg / l.
- 7.- Méthode de numération en appareil automatique en cytométrie de flux de la population de leucocytes basophiles du sang, caractérisée en ce qu'elle comprend :
 - la mise en contact d'un échantillon de sang avec le réactif selon l'une quelconque des revendications 1
 - 25 à 6, dans une enceinte thermostatée,
 - la détection des cellules intactes c'est à dire des basophiles par mesure de variation de résistivité,
 - l'enregistrement de cette mesure sous forme d' histogramme.
- 8.- Méthode selon la revendication 7 caractérisée en ce que la mise en contact du sang et du réactif est effectuée à une température comprise entre 30 et 40 °C et pendant une durée de 5 à 30 secondes.

1.1

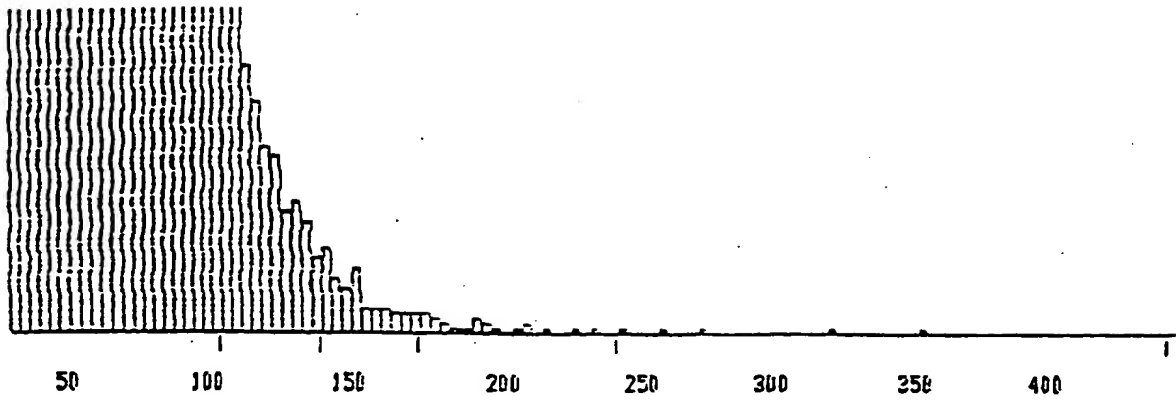

1.2

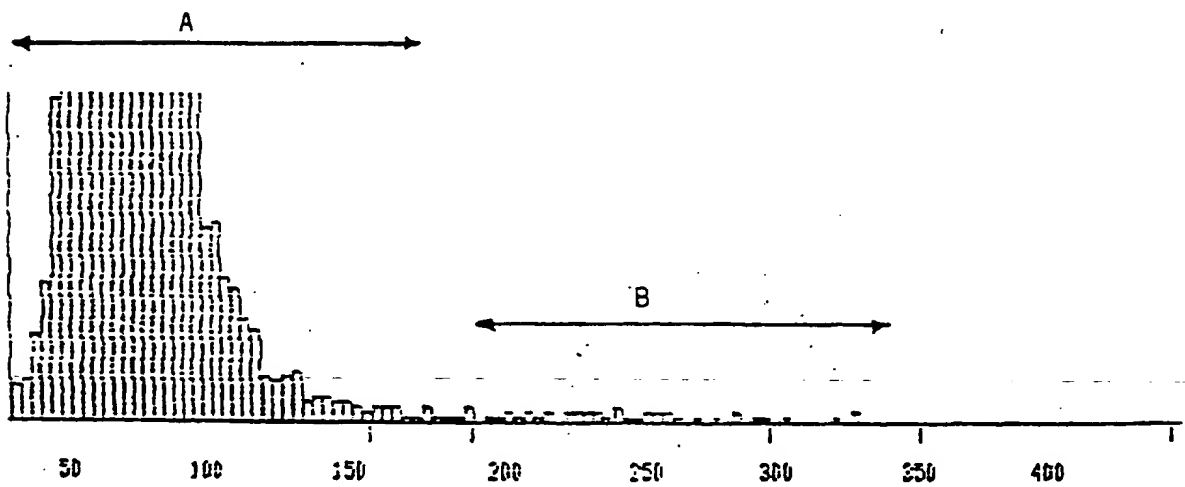



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 91 40 0257

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
A,D	EP-A-0 177 137 (TECHNICON INSTRUMENTS CORP.) * Page 9, ligne 1 - page 13, ligne 4 *	1-8	G 01 N 33/48
A	EP-A-0 316 453 (TOA MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD) * Résumé; page 33, ligne 22 - page 34, ligne 16 *	1-8	
A,D	WO-A-8 403 771 (COULTER ELECTRONICS, INC.) * Page 4, ligne 25 - page 5, ligne 29 *	1,7,8	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
			G 01 N
Lieu de la recherche		Date d'achèvement de la recherche	Examinateur
LA HAYE		15-05-1991	HITCHEN C.E.
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1501 (03.92) (P0402)